



Camilla para ginecología h728_06

Camilla ginecológica con estructura de acero pintado, respaldo y reposapiernas ajustables, reposabrazos abatibles, bandeja colectora de líquidos y orificio ginecológico. Altura fija 80 cm, capacidad 180 kg.

Camilla especializada para departamentos y consultorios de ginecología, diseñada para soportar visitas clínicas y procedimientos obstétricos. La estructura de altura fija garantiza estabilidad operativa, con bastidor en acero pintado blanco y pies ajustables para compensar las irregularidades del suelo. El plano acolchado con espuma de alta densidad (30 kg/m³) y tapizado en vinilo ignífugo clase 1IM asegura el confort de la paciente y el cumplimiento de las normativas de seguridad contra incendios.

Ajustabilidad y ergonomía: el respaldo y el reposapiernas se accionan manualmente mediante palanca para adaptarse a las diferentes posiciones clínicas. Los reposabrazos abatibles de 90° facilitan el acceso lateral, mientras que los soportes para muslos giratorios y ajustables permiten posicionamientos fisiológicos para el examen ginecológico.

Equipamiento integrado: bandeja de acero inoxidable extraíble para la recogida de líquidos biológicos, cojín ergonómico para apoyar el respaldo y orificio ginecológico en el asiento completan la configuración clínica.

Características técnicas

- Dimensiones: L.175 x P.56 x h.80 cm
- Altura: fija 80 cm
- Capacidad máxima: 180 kg
- Bastidor: acero con recubrimiento epoxi y pintura blanca
- Tapizado: 100% vinilo ignífugo clase 1IM
- Acolchado: espuma 5 cm, densidad 30 kg/m³
- Respaldo y reposapiernas: ajuste manual mediante palanca
- Reposabrazos: abatibles de 90°
- Soportes para muslos: giratorios y ajustables
- Bandeja colectora de líquidos: acero inoxidable, extraíble
- Accesorios: cojín ergonómico para respaldo, orificio ginecológico en el asiento
- Pies: ajustables
- Colores disponibles: múltiples opciones para la superficie
- Certificación: marcado CE

Instrucciones de limpieza y desinfección

- **Disolventes prohibidos:** no utilizar jabones, soluciones con alcohol, cetonas, xileno, acetatos o disolventes orgánicos en el tapizado
- **Procedimiento de limpieza:** limpiar con un paño húmedo de algodón suave; luego con un paño humedecido en agua y jabón líquido neutro; enjuagar solo con agua y secar
- **Materiales prohibidos:** no usar cepillos con cerdas ni esponjas de fibra abrasiva o metálica, que pueden causar daños permanentes al tejido

Opcional

- **Set:** de soportes ginecológicos giratorios para las piernas


Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN

- Longitud en milímetros 1750.000000
- Profundidad en milímetros 560.000000
- Altura en milímetros 800.000000
- Tipología altura Fija
- Capacidad 180 kg

HOLITY.COM

Camilla para ginecología h728_06

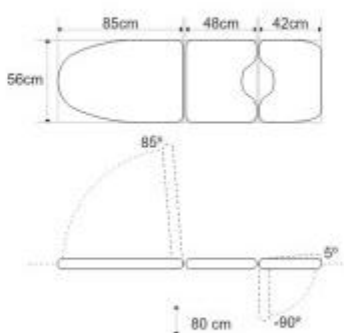

**Camilla para ginecología
h728_06**

: 180 kg
: fissa