

**HOLITY.COM**

Sillón para reconocimiento ginecológico h728_05

Camilla para ginecología con 3 motores. Capacidad: 180 kg. Dimensiones: L.174 x P.56 x h.54/85 cm.

Camilla/sillón para visita ginecológica, preparado para su uso en hospitales y clínicas privadas. Compuesto por un armazón de acero pintado con una superficie acolchada de espuma y revestida de vinilo ignífugo. Equipado con 3 motores para el ajuste eléctrico de altura, respaldo y para llevar la camilla a las posiciones Anti-Trendelenburg y Trendelenburg.

Capaz de asegurar la máxima comodidad al paciente gracias al reposapiés elevable mediante pistón de gas, los reposabrazos abatibles y los soportes de muslos giratorios y regulables. La base está equipada con 4 ruedas que permiten mover la camilla fácilmente y sin esfuerzo. Incluidos en el suministro se encuentran también: la bandeja extraíble recolectora de líquidos en acero inoxidable, el cojín ergonómico, el orificio ginecológico en el asiento y el porta rollo.

Características técnicas:

- Dimensiones: L.174 x P.56 x h.54/85 cm
- Capacidad: 180 kg
- Material del armazón: acero con recubrimiento epoxi y pintura de color blanco
- Material del revestimiento: 100% vinilo
- Revestimiento ignífugo clase 11M
- Acolchado de espuma de 5 cm, 30 kg/m³
- Funcionamiento eléctrico con 3 motores para ajuste de altura, respaldo y alcanzar las posiciones Trendelenburg y Anti-Trendelenburg
- Reposabrazos abatibles de 90° a 180°
- Reposapiés elevable y reclinable mediante pistón de gas
- Soportes de muslos regulables y giratorios
- Bandeja en acero inoxidable extraíble
- Cojín ergonómico para el respaldo
- Orificio ginecológico en el asiento
- Porta rollo
- Mando a distancia
- Ruedas con freno Ø 100 mm
- Superficie disponible en varios colores
- Marca CE

Nota: para la limpieza y desinfección de la superficie NO utilizar jabones o soluciones que contengan alcohol, cetonas, xileno, acetatos o disolventes. Para la eliminación de manchas, pasar primero un paño húmedo de algodón suave, luego un paño mojado con agua y jabón líquido neutro y finalmente limpiar solo con agua y secar. NO UTILIZAR cepillos con cerdas o esponjas de fibra abrasiva o metálica ya que pueden causar daños permanentes al tejido.

- **Lunghezza in millimetri** 1740.0000
- **Profundidad en milímetros** 560.0000
- **Altura en milímetros** 540.0000
- **Tipo altura** Variable
- **Capacidad** 180 kg




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

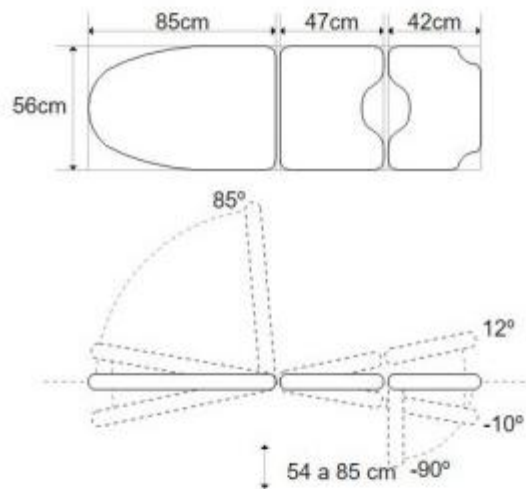

HOLITY.COM

Sillón para reconocimiento ginecológico h728_05

- : 407 mm
- : 400 mm
- : 399 mm
- : variable
- : 180 kg